



OraSure Technologies

## Διάγνωση του αδιάγνωστου

### OraQuick® HCV Rapid Antibody Test

- Γρήγορη δοκιμή στο σημείο της φροντίδας με εργαστηριακά ακριβή αποτελέσματα
- Ακρίβεια >99,1% με πόσιμο υγρό, >99,8% με αίμα
- Πολλαπλοί τύποι συλλογής δειγμάτων, συμπεριλαμβανομένου του πόσιμου υγρού

Το μόνο γρήγορο τεστ που πληροί τις περισσότερες σημαντικές διεθνείς ρυθμιστικές απαιτήσεις:

**FIRST  
AND  
ONLY**

- Π.Ο.Υ. έχει προκριθεί
- Εγκεκριμένο από τον FDA<sup>1</sup>
- Εγκρίθηκε από το Health Canada<sup>2</sup>
- Σήμανση CE




OraQuick, η ταχεία δοκιμή στοματικών υγρών που βοηθά στη διάγνωση των αδιάγνωστων.

**OraQuick® Rapid  
Antibody  
Test  
HCV**



Σύνδεση δυσπρόσιτων πληθυσμών, με τη φροντίδα

# Γιατί να γίνει έλεγχος για ηπατίτιδα C;

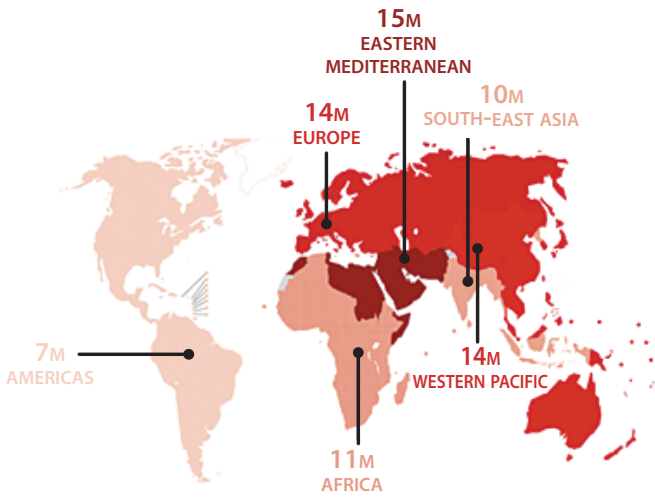

Ιογενής ηπατίτιδα C στον κόσμο

71m  
Global

Η ηπατίτιδα C είναι μια παγκόσμια επιδημία με

**1.34 εκατομμύρια θανάτους**  
κάθε χρόνο

**71 εκατομμυρια ανθρώπους**  
χρόνια μολυσμένοι με HCV παγκοσμίως<sup>3</sup>

**1.75 εκατομμυρια νέες μολύνσεις**  
κάθε χρόνο<sup>3</sup>

**22% αύξηση των θανάτων**  
λόγω ηπατίτιδας από το 2010<sup>4</sup>

Η μη θεραπευμένη ιογενής ηπατίτιδα μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο από κίρρωση και ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα

## ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C σε μόλις 8 εβδομάδες με νέες θεραπείες

Ποσοστά  
θεραπείας  
μέχρι και  
**99%**

Πάνω από **1 εκατομμύριο**  
άνθρωποι υποβλήθηκαν σε  
θεραπεία  
κάθε χρόνο

**5,5 εκατομμύρια άνθρωποι**  
υποβλήθηκαν σε θεραπεία  
για ηπατίτιδα C

Η θεραπεία είναι οικονομικά αποδοτική και μια πορεία θεραπείας μπορεί να κοστίσει μόλις \$200

**194** κράτη  
μέλη του  
**ΠΟΥ**

δεσμεύονται να  
εξαλείψουν την ιογενή  
ηπατίτιδα ως απειλή για  
τη δημόσια υγεία

μέχρι το  
**2030**

## Ο κόσμος εστιάζει στην εξάλειψη

Ο ΠΟΥ έχει θέσει ως στόχο την εξάλειψη της ιογενούς ηπατίτιδας έως το 2030 με:

- Μείωση νέων λοιμώξεων κατά 90%
- Μείωση της θνησιμότητας κατά 65%


43 χώρες έχουν αναπτύξει εθνικά σχέδια εξάλειψης και 36 επιπλέον χώρες αναπτύσσουν επί του παρόντος σχέδια εξάλειψης.

*Σύνδεση χωρών για την εξάλειψη της ιογενούς ηπατίτιδας*

# Γιατί να χρησιμοποιήσετε το OraQuick® HCV Rapid Antibody Test;

Οι παραδοσιακές μέθοδοι δοκιμών δεν εντοπίζουν χρόνια μολυσμένους ασθενείς. Μόνο το 20% των χρόνιων λοιμώξεων από HCV έχει διαγνωστεί<sup>3</sup>

**Οι πληθυσμοί που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο είναι εκείνοι που χρειάζονται περισσότερο ακριβείς, από του στόματος ταχείες αναλύσεις**

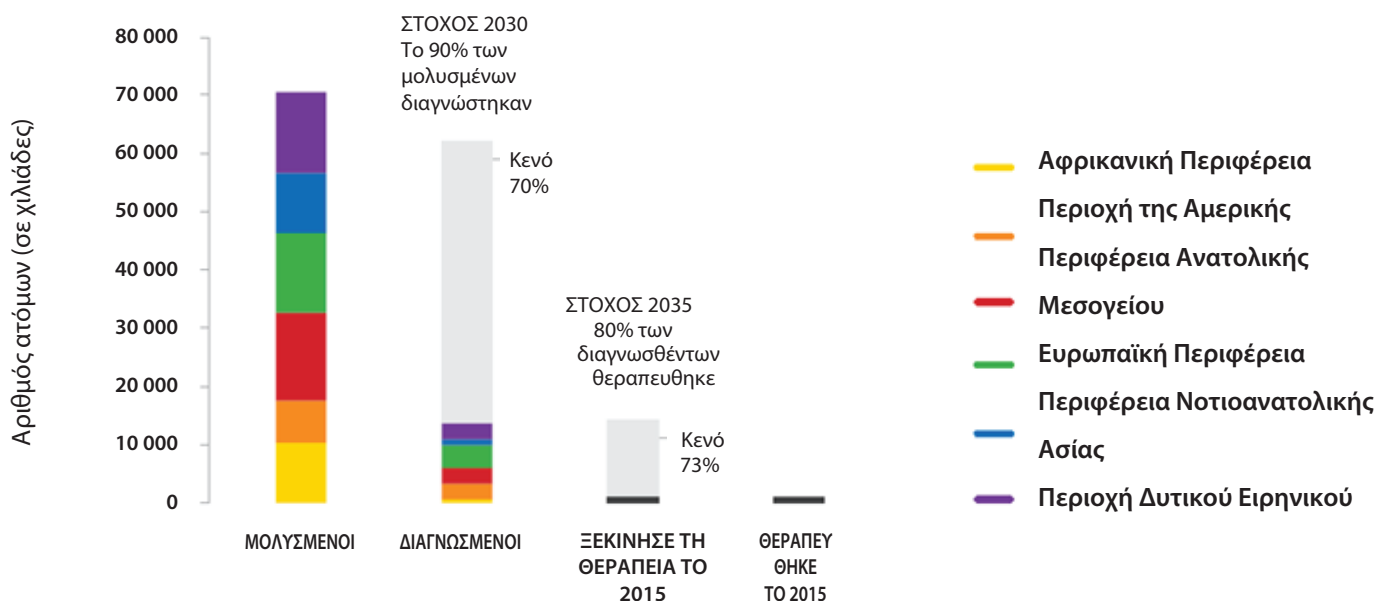

**Χρήστες ουσιών** – Οι μη ασφαλείς διαδικασίες υγειονομικής περίθαλψης και η χρήση ενέσιμων ναρκωτικών ήταν οι κύριες αιτίες νέων λοιμώξεων από HCV, αντιπροσωπεύοντας τις περισσότερες από τις 1,75 εκατομμύρια νέες λοιμώξεις

**Low-resource settings** – Οι χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που ζουν με HCV (72%), ωστόσο η πρόσβαση σε εξετάσεις και θεραπεία είναι πιο περιορισμένη σε αυτές τις χώρες

## Η γρήγορη δοκιμή έχει πολλά πλεονεκτήματα

Εύκολο στην εκτέλεση

Δεν απαιτεί ακριβό εξοπλισμό ή εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό

Άμεσα αποτελέσματα

Καλύτερη προσβασιμότητα και ευελιξία σε διάφορες ρυθμίσεις

## Ταχεία δοκιμή στοματικού υγρού έχει ακόμη περισσότερα οφέλη

Δεν απαιτεί φλεβοκέντηση ή δάχτυλο  
Οι ασθενείς προτιμούν το στοματικό υγρό από τη φλεβοκέντηση ή το δάχτυλο

Αυξημένη αποδοχή δοκιμών λόγω προτίμησης για συλλογή υγρών από το στόμα<sup>5</sup>

Προστατεύει το ιατρικό προσωπικό από ανεπιθύμητους βιολογικούς κινδύνους<sup>6</sup>

Το OraQuick HCV Rapid Antibody test χρησιμοποιείται επί του παρόντος ως το κύριο εργαλείο προσέγγισης σε πολλά προγράμματα εξάλειψης

**OraQuick**® Rapid Antibody Test  
**HCV**

Κλινικά αποδεδειγμένο

Εύκολο στη χρήση

Φιλικό στον ασθενή

Σύνδεση ασθενών με φροντίδα

Ευέλικτο

## ΑΚΡΙΒΗΣ. Αξιόπιστο αποτέλεσμα με >99% ακρίβεια<sup>7</sup>

Δείγμα	Ευαισθησία	Ακρίβεια
Στοματικό υγρό	98,1% (95%CI: 96,9-99,0)	99,6% (95%CI: 99,2-99,9)
Αίμα δακτυλου	99,7% (95%CI: 99,0-100,0)	99,9% (95%CI: 99,6-100,0)
Φλεβοκεντηση	99,7% (95%CI: 99,0-100,0)	99,9% (95%CI: 99,5-100,0)
Πλάσμα	99,9% (95%CI: 99,3-100,0)	99,9% (95%CI: 99,5-100,0)
Ουρός	99,9% (95%CI: 99,3-100,0)	99,9% (95%CI: 99,6-100,0)

## ΑΠΛΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 3 ΒΗΜΑΤΩΝ που απαιτεί λιγότερο από 1 λεπτό χρόνου

	Συλλογή	Τοποθέτηση	Ανάγνωση
<b>3</b> ΕΥΚΟΛΑ ΒΗΜΑΤΑ			
	Δείγμα υγρού από το στόμα. Ταμπονάρετε το κάτω και το πάνω μέρος των ούλων μία φορά.	Τοποθετήστε τη συσκευή σε φιαλίδιο που περιέχει ρυθμιστικό διάλυμα.	Διαβάστε τα αποτελέσματα μεταξύ 20 και 40 λεπτών.
			Arνητική      Θετική

## ΓΡΗΓΟΡΑ. Δοκιμή και παράδοση αποτελεσμάτων σε 20 λεπτά για άμεση σύνδεση με τη φροντίδα

Η ευέλικτη πλατφόρμα δοκιμών είναι ιδανική τόσο για κλινικά όσο και για μη κλινικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων: νοσοκομείων, κλινικών, φαρμακείων, χωριών και αγροτικών περιοχών.

<sup>1</sup> Το πόσιμο υγρό δεν είναι εγκεκριμένο από τον FDA των ΗΠΑ.

<sup>2</sup> Το πόσιμο υγρό δεν έχει άδεια από την Health Canada.

<sup>3</sup> ΠΟΥ, Παγκόσμια Έκθεση Ηπατίτιδας, 2017.

<sup>4</sup> ΠΟΥ. Ιογενής ηπατίτιδα: ένας κρυφός δολοφόνος κερδίζει ορατότητα, 2017.

<sup>5</sup> Drobnik, Ann et al. «Επιπτώσεις στη δημόσια υγεία του γρήγορου προσυμπτωματικού ελέγχου της ηπατίτιδας C με στοματικό στυλέο για οργανισμούς που εδρεύουν στην κοινότητα που εξυπηρετούν πληθυσμούς υψηλού κινδύνου».

American Journal of Public Health 101.11 (2011): 2151–2155. PMC. Ιστός, 7 Ιουλίου 2017. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3222414/>

<sup>6</sup> ΠΟΥ. Συχνές ερωτήσεις για την ηπατίτιδα C για επαγγελματίες υγείας, 2017.

<sup>7</sup> Χαρακτηριστικά απόδοσης που βρέθηκαν σε IFU με σήμανση CE.