



Sekusept® MultiEnzyme

ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ 4!

Ο πρωτοποριακός συνδυασμός 4 ενζύμων με επιφανειοδραστικά και άλλα συστατικά στο Sekusept® MultiEnzyme σας παρέχει άριστη απορρυπαντική δράση. Το Sekusept® MultiEnzyme, τόσο με άρωμα όσο και χωρίς άρωμα, αποτελεί το ιδανικό ενζυματικό απορρυπαντικό για κάθε ιατρικό εργαλείο συμπεριλαμβανομένων και εύκαμπτων ενδοσκοπίων.

ΓΡΗΓΟΡΟ


Το Sekusept® MultiEnzyme εγγυάται ισχυρή και αποτελεσματική καθαριστική δράση. Το γεγονός αυτό σας βοηθά να μειώσετε τους χρόνους καθαρισμού και να αποφύγετε την ανάγκη για επανάληψη της διαδικασίας.

ΑΠΛΟ

Οι σύγχρονες, φιλικές προς το χρήστη συσκευασίες και η μεγάλη ποικιλία ειδικών συστημάτων για αυτόματη δοσομέτρηση σας βοηθούν να έχετε πάντοτε τη σωστή αραίωση του προϊόντος, εύκολα και με ελάχιστη προσπάθεια.

ΑΣΦΑΛΕΣ

Το ουδέτερο pH του προϊόντος και τα ειδικά συστατικά που περιέχει εγγυώνται εξαιρετική συμβατότητα με τα υλικά. Το διάφανο γαλάζιο χρώμα του διαλύματος επιβεβαιώνει πως το προϊόν έχει προστεθεί στο διάλυμα και εξασφαλίζει πως τα εργαλεία παραμένουν ορατά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

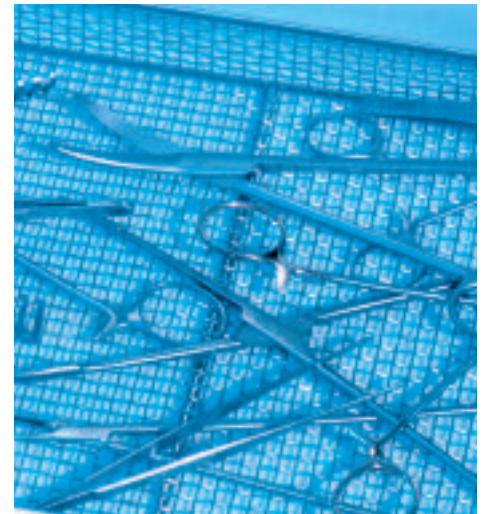

Τι σας προσφέρουμε	Τα πλεονεκτήματά σας
Πρωτοποριακός συνδυασμός 4 ενζύμων, επιφανειοδραστικών και άλλων συστατικών.	Άριστη καθαριστική δράση. Μειώνει τον χρόνο καθαρισμού και αποφεύγεται η ανάγκη για επανάληψη της διαδικασίας.
Δύο τύποι: Με ή χωρίς άρωμα	Ευχάριστο, μη ερεθιστικό άρωμα που δημιουργεί ιδανικές συνθήκες εργασίας.
Διάφανο γαλάζιο χρώμα	Υποδεικνύει εάν έχει προστεθεί το προϊόν. Εύκολη ταυτοποίηση.
Φιάλη 2 λίτρων με διάφανη ζώνη ελέγχου	Ευκολία χειρισμού και δοσομέτρησης. Ευκολία ελέγχου της στάθμης του προϊόντος.
Εξαιρετική συμβατότητα με υλικά	Προστασία για τα πολύτιμα εργαλεία.
Άριστη αφριστική συμπεριφορά	Κατάλληλο για χρήση σε δοχείο απολύμανσης, σε λάντζα αλλά και σε πλυντήριο υπερήχων. Άριστη οπτική επαφή με τα εργαλεία
Κατάλληλο για τις αυτόματες δοσομετρικές συσκευές Ecolab (DG 1 ή DG 3 για τα δοχεία των 6 λίτρων)	Απλή εφαρμογή με σωστή δοσολογία.

Εφαρμογές

Ενζυματικό απορρυπαντικό για κάθε είδους ιατρικό εργαλείο συμπεριλαμβανομένων και εύκαμπτων ενδοσκοπίων. Κατάλληλο για χρήση σε λουτρά υπερήχων.

Οδηγίες χρήσης

Διαλύστε 5-20ml Sekusept® MultiEnzyme για κάθε λίτρο νερό (ανάλογα με το είδος και την ποσότητα των ρύπων). Τοποθετήστε το αντικείμενο που πρέπει να καθαρίσετε στο διάλυμα εξασφαλίζοντας πως όλες οι επιφάνειες έχουν διαβραχεί πλήρως. Συνιστούμε να φοράτε προστατευτικά γάντια και μάσκα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Διαβάστε πάντοτε το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος και τις οδηγίες χρήσης πριν από την εφαρμογή.

Συσκευασίες:

Χωρίς άρωμα Sekusept® MultiEnzyme

Χαρτοκιβώτιο 4 x 2lt

Δοχείο 6 lt

Με άρωμα Sekusept® MultiEnzyme P

Χαρτοκιβώτιο 4 x 2lt

Δοχείο 6 lt

Συστατικά:

Πρωτεάσες, αμυλάσες, λιπάσες, επιφανειοδραστικά, αντιδιαβρωτικά, διαλύτες, γαλακτωματοποιητές, βοηθητικοί παράγοντες.

CE



Προσφέρουμε ολοκληρωμένα συστήματα και services για την κάλυψη όλων των αναγκών σας στον βιομηχανικό, ξενοδοχειακό και νοσοκομειακό καθαρισμό και υγιεινή. Ζητείστε πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.
Ecolab- Ο συνεργάτης σας για ολοκληρωμένες λύσεις υγιεινής.